



Une solution adaptée

FitLife, pour vos patients difficiles

Pilosité faciale, prothèses dentaires, effondrement de la racine du nez, irrégularités faciales et claustrophobie sont des problèmes qui peuvent avoir un impact considérable sur la capacité à accepter un traitement VNI ou PPC et à obtenir un confort efficace. FitLife offre une solution aux patients qui répond parfaitement à ces spécificités. Il établit rapidement un joint étanche autour du visage sans pression excessive tout en maintenant une parfaite visibilité. L'application et le retrait sont simplifiés grâce à des fixations innovantes, faciles à utiliser et un harnais performant. La taille L du FitLife s'adapte à la plupart des patients. Le nouveau FitLife est la dernière technologie avancée qui nous permet de vous aider à prendre en charge 100 % de vos patients 100% du temps.

PHILIPS

RESPIRONICS

Le harnais FitLife est disponible en tailles petite et grande.

Une fois le masque mis en place et le harnais correctement ajusté, le système de fixation permet un retrait rapide et la sauvegarde de cet ajustement. Lors de la mise en place suivante, aucun réajustement n'est nécessaire.

Sa forme unique s'applique autour du visage et évite toute pression sur l'arête nasale.

Le large voile en silicone, répartit de façon homogène la pression sur le front et les zones planes du visage. Sa grande surface de contact améliore l'étanchéité et le confort.



Un raccord rotatif permet le mouvement libre du circuit.




Un champ de vision dégagé réduit le sentiment de claustrophobie du patient

Une valve de sécurité s'abaisse si la pression chute en dessous de 3 cm d'H₂O afin de permettre au patient d'expirer son CO₂.

Des orifices de fuite intentionnelle intégrés à diffusion radiale permettent un fonctionnement très silencieux.

Prise de mesure de pression pour ligne de pression proximale ou autre dispositif de surveillance.

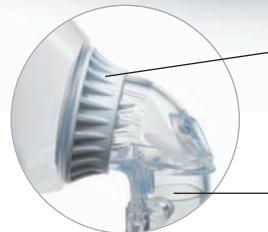

Article	
Masque FitLife	Références
Masque taille P (avec harnais taille P)	1060803
Masque taille L (avec harnais taille L)	1060804
Masque taille P (avec harnais taille P) – sans dispositif de fuite intentionnelle	1061711
Masque taille L (avec harnais taille L) – sans dispositif de fuite intentionnelle	1061712
Pièces et accessoires	
Harnais FitLife, taille P	1060807
Harnais FitLife, taille L	1060808
Fixations pour harnais FitLife (par 2)	1060913
Coude d'expiration FitLife	1060809
Coude FitLife SE	1060810
Raccord rotatif	7041
Dispositif de fuite intentionnelle Whisper Swivel	332113

Respironics, FitLife et EZ Peel sont des marques commerciales de Respironics, Inc. et de ses filiales.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés.
Philips Healthcare se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques et/ou d'arrêter la production de tout produit à tout moment et sans obligation de préavis, et ne pourra être tenue pour responsable des conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.
ATTENTION : Conformément à la législation fédérale des États-Unis, ces dispositifs ne peuvent être vendus que par un médecin ou sur prescription médicale.

Broudy KB 7/30/09 MCI 4102442 PN 1063922

Philips Healthcare fait partie de Royal Philips Electronics

Respironics Europe, Moyen-Orient, Afrique
+33 1 47 52 30 00

Respironics France
+33 2 51 89 36 00

Respironics Suisse
+41 6 27 47 17 50

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668
Service Client
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)
www.philips.com/respironics
www.respironics.fr